


Bộ phòng thí nghiệm chiếu xạ loại điểm tia cực tím
LKUVL-115

Chiếu tia UV thật dễ dàng!

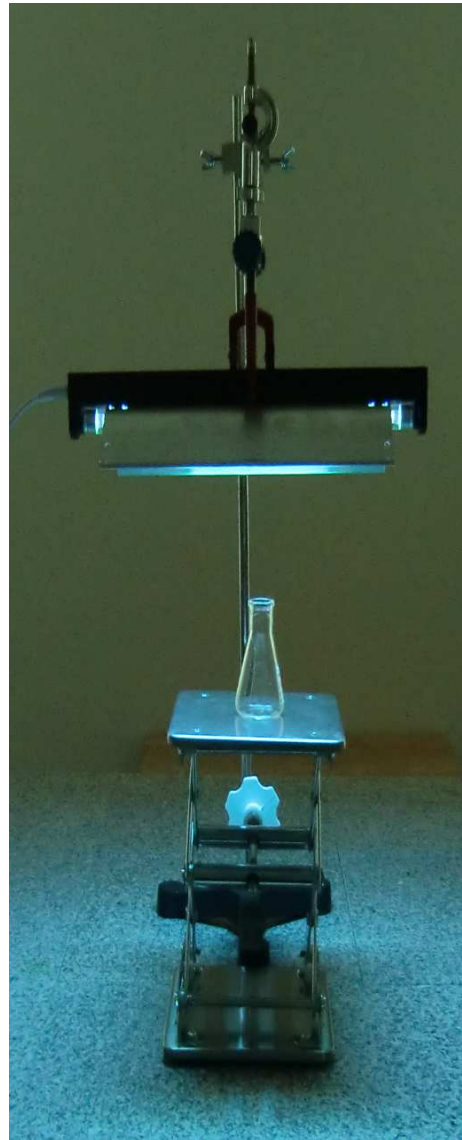



◆ **Tính năng** ◆

- 1). Vì là bộ kit nên người dùng có thể dễ dàng sử dụng thiết bị chiếu tia UV.
- 2). Vì nó có bộ khuếch đại tích hợp nên việc vận hành ánh sáng rất dễ dàng.
- 3). Chiếu xạ 253,7nm, có tác dụng khử trùng cao, công suất cao 8W.
- 4). Bộ nâng bằng tay giúp dễ dàng thay đổi và điều chỉnh đường kính chiếu xạ.

Heat-tech

Phân bố quang phổ


Heat-tech

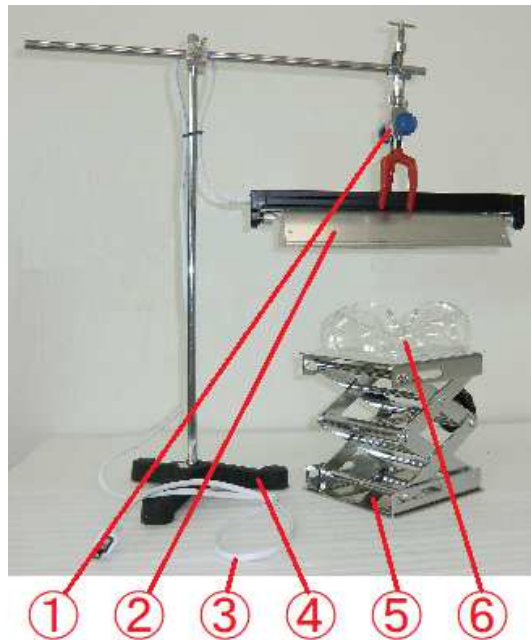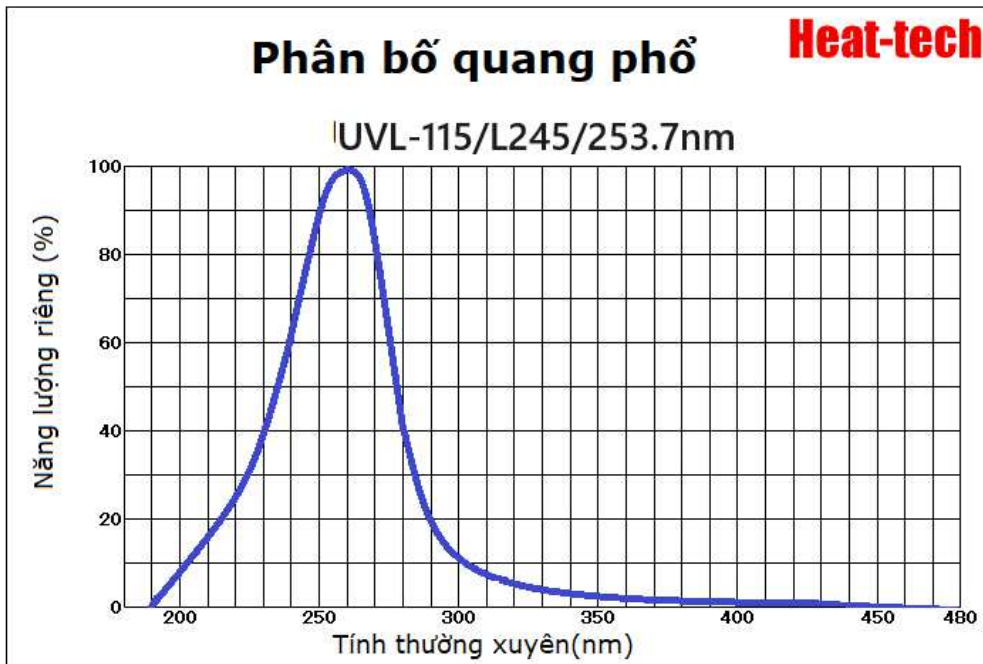

Ví dụ lắp ráp bộ thí nghiệm

(* Bộ dụng cụ phòng thí nghiệm được cung cấp dưới dạng các bộ phận riêng lẻ.)

- ① Kẹp xoay mở đôi để cố định thiết bị chiếu xạ
Chiếu xạ ở mọi góc độ.
- ② Thiết bị chiếu xạ tuyến tính tia cực tím UVL-115/L245/253.7nm-8w
Vì nó có bộ khuếch đại tích hợp nên rất dễ vận hành.
Một tấm phản xạ lớn ngăn chặn tia UV lan rộng.
- ③ Dây nguồn AC220V 1,5m
- ④ Đế thử nghiệm
- ⑤ Nâng thủ công
80mm được nâng lên và hạ xuống bằng một núm xoay 16 vòng nên
134mm, chiều cao thay đổi 80mm.
80mm được nâng lên và hạ xuống bằng một núm xoay 16 vòng nên
có thể đạt được độ chính xác 0,5mm.
- ⑥ Kính chống tia tia cực tím
Điểm chiếu xạ có thể được xác nhận một cách an toàn bằng mắt thường.

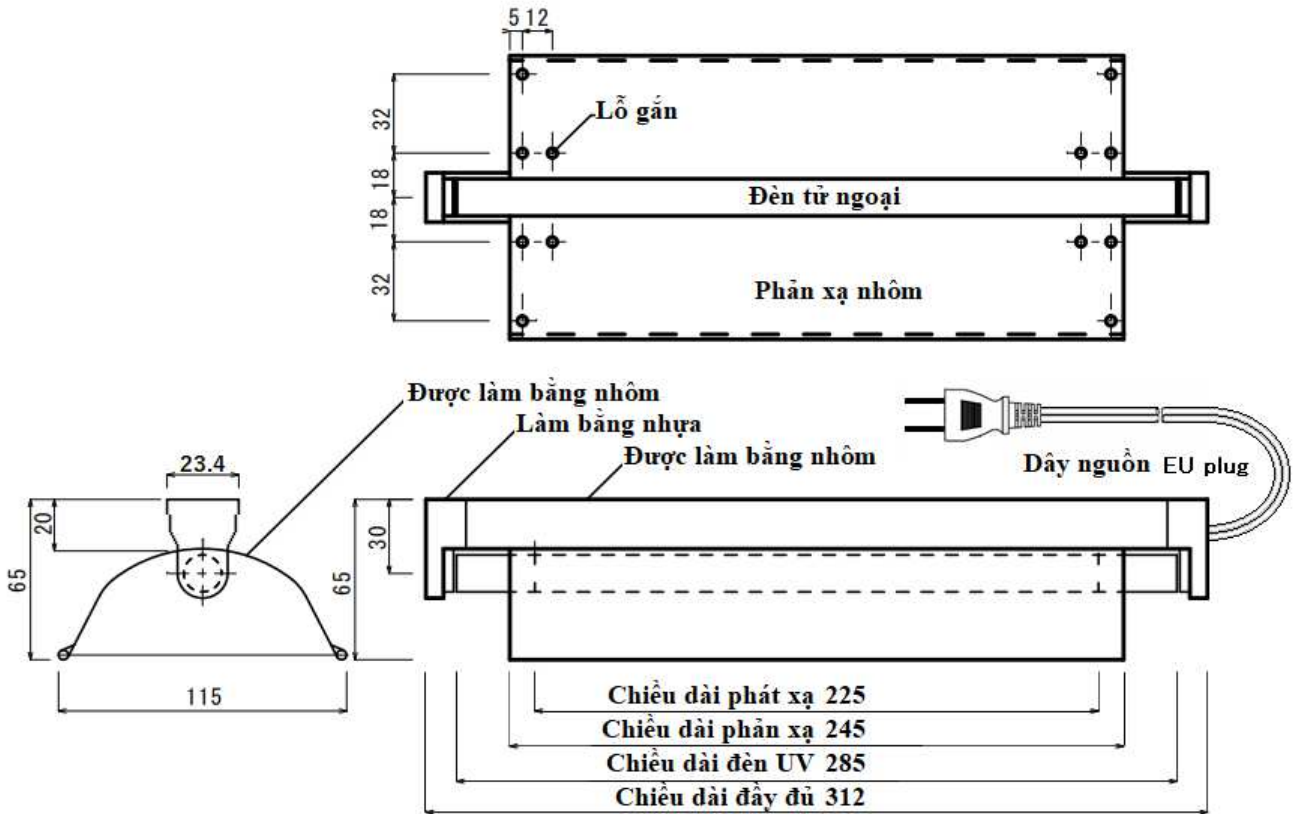

[Notes]

[Ghi chú]

- ① Tia cực tím có hại cho mắt. Hãy nhớ đeo kính an toàn khi làm việc.
- ② Khi nhiệt độ trong nhà giảm, lượng tia UV phát ra cũng giảm.
- ③ Máy này là máy chính xác. Đừng để nó rung động.
- ④ Mười hai lỗ gắn được khoan trên gương phản xạ.

Chiều dài gương L	245mm
Điện áp cung cấp điện V	AC220V
Năng lượng điện W	8W
Tần số trung tâm	253.7nm
Kiểu mẫu	UVL-115/220v-8w/L245/253.7nm
Tên sản phẩm	Máy chiếu tuyến tia tử ngoại

Ngày	2022/10/21
------	------------

Heat-tech Co.,Ltd.

Sưởi ẩm tốc độ cao không tiếp xúc

Heat-tech

Heat-tech Co., Ltd.

<https://vnm.heat-tech.biz/>

International Medical Device Alliance IMDA

1-6-5 Minatojima Minamimachi Chuo-ku Kobe 650-0047 Japan

TEL 81-78945-7894 FAX 81-78945-7895

E-mail info@heat-tech.biz